

Soprano Titanium

mai Puternic, mai Rapid, mai Inteligent

Epilarea definitivă
Reinventată





Descoperă **Soprano Titanium**

O platformă avansată de îndepărtare a părului, care combină funcționalitatea desăvârșită și confortul de neegalat. Datorită dimensiunii mari a spot-ului, de 4 cm² și a sistemului de răcire avansat, tratamentele sunt acum mult mai rapide și fără durere - oferind o soluție semnificativ îmbunătățită pentru pacienți și pentru practicieni. Soprano Titanium folosește avantajele a trei lungimi de undă combinate și asigură o experiență îmbunătățită pacientului și o abordare orientată spre profit, creând o soluție nouă și unică, și orientată către rezultate, în industria epilării profesionale.

Caracteristicile sistemului Titanium

✓ Mărimea excepțională a spotului

40% mai rapid!

Soprano Titanium dispune de Quattro 3D, un aplicator nou, unic și eficient, cu o dimensiune a spotului deosebit de mare de 4 cm², capabil să lucreze pe o grilă de 600 cm pătrați. Acest aplicator avansat permite tratamente mult mai rapide și fără durere, reducând semnificativ timpul de tratament și asigurând o experiență mai confortabilă pentru pacienți.

✓ Conector dublu

Mai multă flexibilitate. Mai comod.

Soprano Titanium este prima versiune a sistemelor de îndepărtare a părului Soprano care include doi conectori, ceea ce permite conectarea în permanență a două aplicatoare diferite. Această caracteristică permite o mai mare flexibilitate, eliminând în același timp timpul petrecut cu comutarea aplicatoarelor în timpul tratamentelor.



✓ ICEPlus*

Răcire în contact continuu

ICE Plus este o tehnologie avansată care răcește continuu pielea și facilitează temperatura controlată pe toată durata întregului tratament. Vârful de safir rece ICE Plus™ reduce la minimum riscul de afectare a epidermei, păstrând căldura în dermul în care sunt tratați foliculii de păr. Temperatura rămâne constantă, ceea ce contribuie la eficiența diodei. Pacienții se pot bucura acum de o experiență complet lipsită de durere, rece și confortabilă pe parcursul ședinței.

✓ 15' Ecran Android

Prietenos și funcțional

Datorită ecranului cu dimensiuni mari de 15' pentru Android, cu parametri prestabiliți, practicienii se pot bucura de o experiență de lucru mai intuitivă și mai ușoară pentru utilizator.






Smart **Clinic**

Administrează-ți clinica. Maximizează-ți potențialul.

Smart Clinic este un instrument inovator în Cloud care îți oferă acces permanent la informații cu ajutorul unei aplicații și a unei platforme online. Îmbunătățește procesele de gestionare reflectând starea în timp real a platformelor, aplicatoarelor și productivității, permițându-ți să accesezi datele și să faci ajustări fără a pierde timpul. Smart Clinic optimizează și standardizează, împuternicind deciziile bazate pe date și statistici autentice - nu pe intuiție. De asemenea, intensifică eforturile de marketing, permițând notificări despre lansări, produse noi, invitații la evenimente și multe altele.

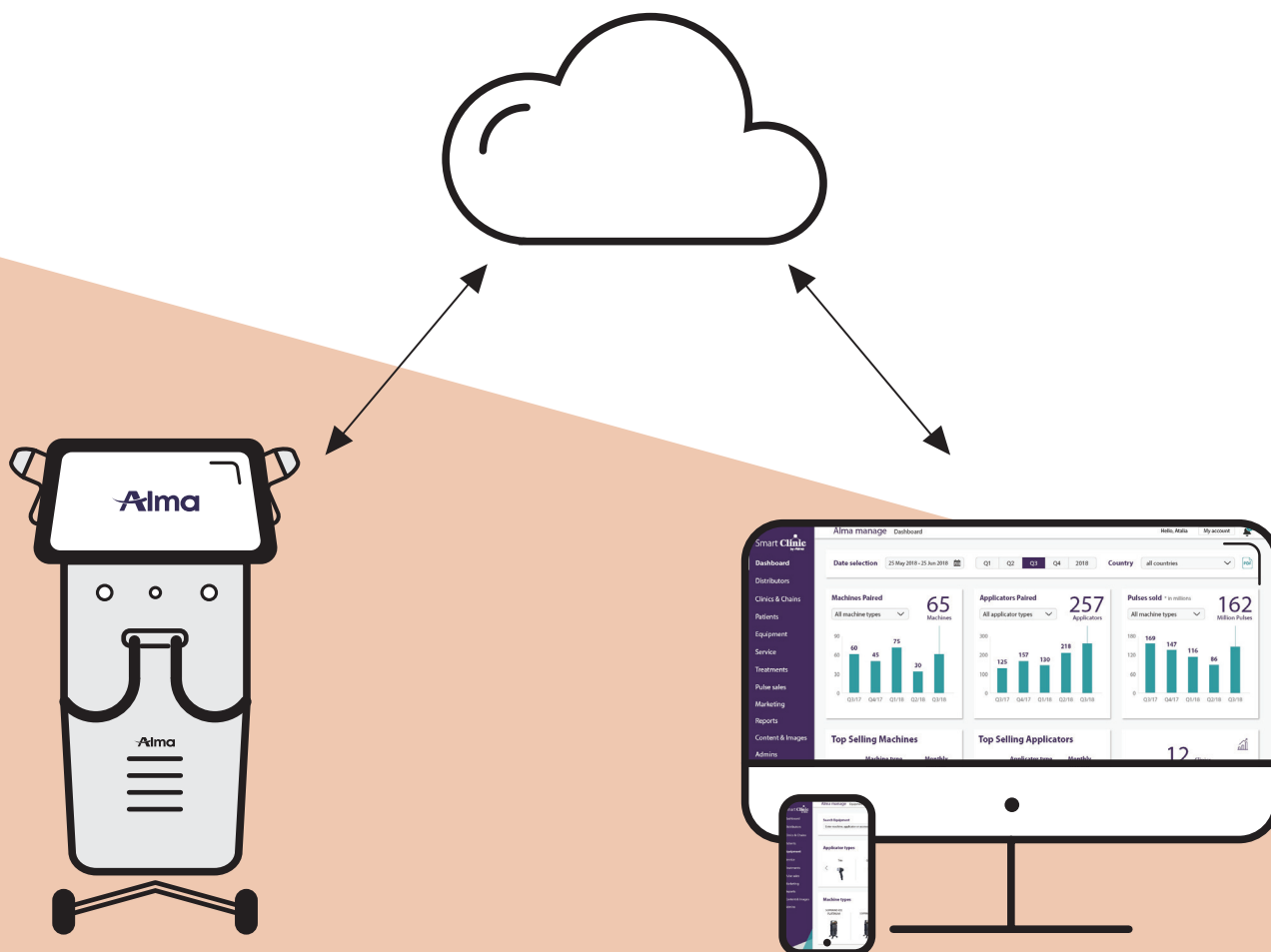



NU RATA NIMIC

Smart Clinic este o soluție completă care îți oferă imaginea de ansamblu a business-ului tău, fie că este o singură clinică sau o rețea.

Platforme și aplicatori | Vă permite să vizualizați numărul de impulsuri, timpul lucrat, zonele tratate, numărul de platforme și aplicatoare operate de fiecare practicant la un moment dat. Aceste date sunt cruciale pentru modificările în curs ale echipamentului clinicii dvs. și pentru colectarea statisticilor operaționale (pe platforme, aplicator și clinică), urmărirea performanțelor medicului și îmbunătățirea gestionării resurselor umane.

Managementul tratamentului | Monitorizarea îngrijirii individuale a pacientului, inclusiv zonele tratate, protocoalele și data vizitei. Monitorizați cazurile și nevoile pacienților și contactați-le când urmează următorul lor tratament. Îmbunătățiți asistența și experiențele clienților, îmbunătățiți rezultatele clinice și consolidați implicarea și relațiile cu clienții. Smart Clinic prezintă protocoale clinice pe ecran, făcând protocoalele de copiere pe hârtie un lucru din trecut.

Întreținere și service | Smart Clinic vă permite să apelați service-ul în orice moment prin intermediul aplicației, trimițându-vă un ghid de rezolvare a problemelor, astfel încât acestea să poată fi rezolvate atunci când apar. Oferă posibilitatea de a urmări tratamentele și de a vizualiza statistici pentru fiecare mașină pentru a preveni utilizarea excesivă și subutilizarea, urmărirea erorilor și a primi alerte de întreținere continuă (apă / filtre). Cu Smart Clinic, puteți preveni timpul dezactivat, gestiona resursele mai eficient și spori productivitatea.



Sinergia tehnologiilor. **Rezultate Superioare.**


Tehnica
SHR™

SHR™ - este inovația Alma și singura metodă de epilare cu rezultate dovedite clinic, nedureroasă și eficientă pentru toate tipurile de piele, inclusiv pentru cea închisă la culoare și bronzată. Încălzirea sa unică treptată și metoda rapidă de eliberare a pulsului tratează eficient foliculul de păr și împiedică re-creșterea, prevenind în același timp rănirea țesutului din jur. SHR™ permite efectuarea procedurii pe toate tipurile de piele în orice moment al anului, precum și pe pielea bronzată.

Tehnologia 3D



Disponând de tehnologia sa exclusivă 3D, Soprano Titanium combină cele mai eficiente trei lungimi de undă laser într-un singur aplicator, vizând simultan diferite adâncimi de țesut și structuri anatomice din foliculul pilos. Prin combinarea nivelului de absorbție și penetrare a diferitelor lungimi de undă, împreună cu acoperirea extinsă a tratamentului, confortul crescut și cerințele de întreținere scăzute, Soprano Titanium este cel mai sigur și mai eficient tratament de îndepărtare a părului disponibil astăzi. Tehnologia 3D este o soluție superioară de îndepărtare a părului.

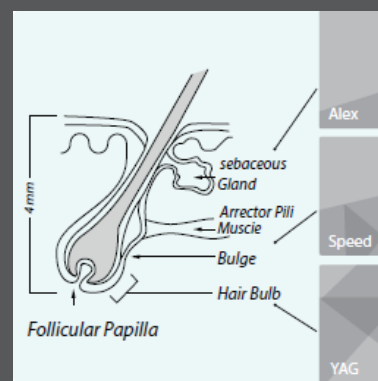

ALEX 755nm

Lungimea de undă Alexandrite îmbunătățește absorbția de energie de către cromoforul de melanină, făcându-l ideal pentru o gamă variată de tipuri de piele și păr, în special pentru pielea deschisă la culoare și pentru părul fin. Cu o penetrare superficială crescută, de 755nm atinge bulbul foliculului păr și este eficient pentru firele crescute sub piele.

SPEED 810nm

810nm este o lungime de undă clasică pentru îndepărtarea firului de păr, oferind o penetrare profundă a foliculului de păr cu o putere medie mare, o rată rapidă de repetare și un spot mare de 2cm² care asigură tratamente eficiente în timp. 810nm are un nivel moderat de absorbție a melaninei, ceea ce îl face sigur pentru tipurile de piele mai întunecate. Capacitățile sale de penetrare profundă vizează bulbul foliculului de păr, în timp ce penetrarea moderată a adâncimii țesutului îl face ideal pentru tratarea brațelor, picioarelor, obrazilor și bărbiei.

YAG 1064nm

Lungimea de undă YAG 1064 se caracterizează printr-o absorbție mai mică a melaninei, ceea ce o face o soluție perfectă pentru tipurile de piele mai închise la culoare. 1064nm oferă, de asemenea, cea mai adâncă penetrare a foliculului de păr, astfel încât să vizeze Bulb și Papila, în timp ce tratează părul din zone precum scalpul, axile și zonele pubiene. Cu absorbția mai mare a apei generând o temperatură mai ridicată, încorporarea lungimii de undă de 1064 nm crește profilul termic al tratamentului general, ceea ce duce la o îndepărtare a părului extrem de eficientă și la rezultate îmbunătățite.

Aplicatoarele Titanium



4Quattro

3D și cu 40% mai rapid!

Acest aplicator exclusiv este un atu valoros pentru orice clinică. Prin dimensiunea sa mare de 4 cm² și integrarea a trei lungimi de undă, facilitează acoperirea crescută a tratamentului pentru a reduce semnificativ timpul de tratament și a face procesul mai ușor și mai sigur pentru pacienți. Cu Quattro, epilarea este mai rapidă, eficientă și convenabilă.



TRIO - 3 în 1

Acest aplicator exclusiv este un atu valoros pentru orice clinică. Prin dimensiunea sa mare de 4 cm² și integrarea a trei lungimi de undă, facilitează acoperirea crescută a tratamentului pentru a reduce semnificativ timpul de tratament și a face procesul mai ușor și mai sigur pentru pacienți. Cu Quattro, epilarea este mai rapidă, eficientă și convenabilă.



SPEED™ 810 - Up To Speed

Completați mai multe sesiuni de tratament în mai puțin timp, cu acest aplicator de dimensiuni mari. Tratează mai rapid zonele mai mari, oferind pacienților o procedură de epilare sigură și eficientă.



DIODE LASER ALEX 755 - Puterea diversității

Absorbția puternică, combinată cu răcirea continuă, suprafața de acoperire, confortul și întreținerea facilă, permit tratarea unei game largi de tipuri și culori de păr, în special părul deschis și subțire.



COMPACT 810 - Light And Lean

Prin designul său ergonomic, cu greutate ușoară, acest aplicator face tratamentele mult mai confortabile pentru practicieni și mai plăcute pentru pacienți.



CAPĂȚUL PENTRU FAȚĂ - Acoperire îmbunătățită

Prin designul său ergonomic, cu greutate ușoară, acest aplicator face tratamentele mult mai confortabile pentru practicieni și mai plăcute pentru pacienți.

Beneficiile Platform



SPOT MARE, DE 4 CM² PENTRU
TRATAMENTE RAPIDE



SISTEM DE RĂCIRE CONTINUĂ
ICE PLUS™



DOI CONECTORI



SMART CLINIC



TEHNOLOGIE 3D CU EFICIENȚĂ
DOVEDIDĂ CLINIC



ECRAN MARE (15' ANDROID), INTUITIV,
CU PARAMETRII PRESETAȚI



FOTOTIPURI I – VI ȘI PIELE BRONZATĂ




FĂRĂ CONSUMABILE



Sunt foarte mulțumit de rezultatele pe care le pot obține cu Soprano Titanium. Pe lângă gradul de eficiență și siguranță ridicat, baza pentru orice tratament de îndepărtare a părului, există funcții suplimentare, cum ar fi Smart Clinic și aplicatorul unic Quattro, care îl situează deasupra și dincolo de orice alt sistem de pe piață.



*Dr. Pablo Naranjo MD, doctor, director medical
al Elite Laser Clinic & Laser Unit, NISA Hospital, Madrid, Spain*

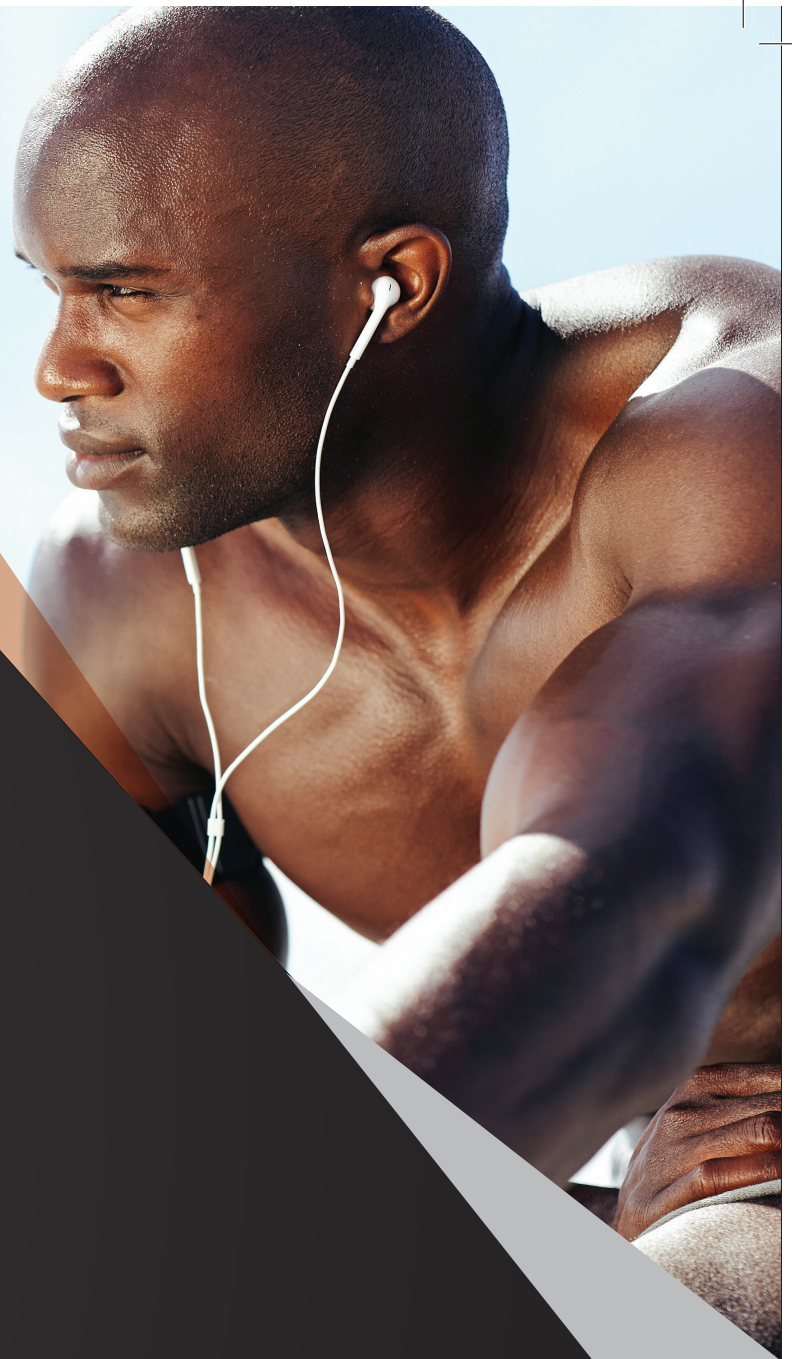



Epilarea definitivă, **Reinventată.**

Alma Lasers Moldova | www.almalasers.md | sales@almalasers.md | +373(69)015111